


## CONFORM



resorbable collagen membrane

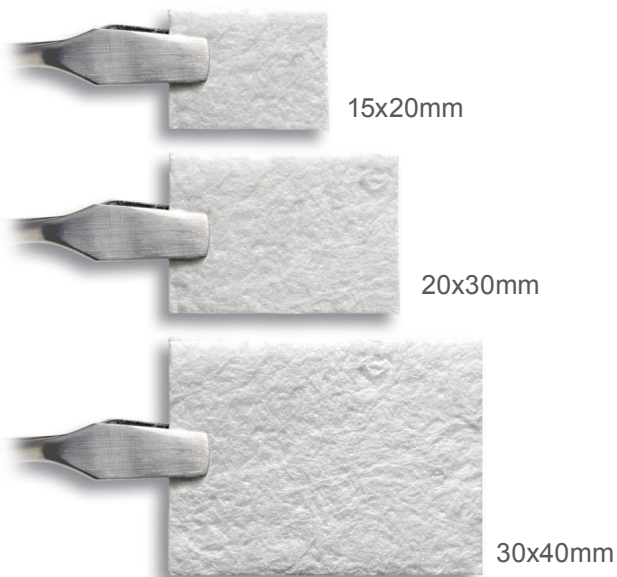

Membrana in collagene riassorbibile, di origine bovina grazie alle sue caratteristiche di "zero memory", è ideale per favorire la guarigione dell'osso e del tessuto circostante.

Quando è idratata **conFORM** si adatta naturalmente a qualsiasi difetto chirurgico. L'elevata resistenza alla trazione, rende **conFORM** la membrana ideale per le suture, anche quando è idratata.

La membrana in collagene riassorbibile **conFORM** è studiata per l'utilizzo in chirurgia orale come materiale riassorbibile nei processi di guarigione nelle aree di sedi implantari, difetti ossei, difetti parodontali e aumento della cresta ossea.

**ACE conFORM**, è una matrice membranosa bianca non friabile, che si distingue per geometria definita, stabilità in vivo, permeabilità e resistenza meccanica.

Creata a partire da collagene di tipo I altamente purificato, **conFORM di ACE** è sterile, non pirogenica e monouso.

La sua riassorbibilità elimina la necessità di un secondo intervento chirurgico.

### Caratteristiche:

- Matrice di membrana ingegnerizzata, bianca e non friabile, proveniente da collagene altamente purificato di Tipo I
- Completamente riassorbibile, con un tempo di riassorbimento fino a 3-4 mesi
- Guida il processo di guarigione e rigenerazione dell'osso e del tessuto circostante
- L'esclusivo orientamento delle fibre conferisce alla membrana un'elevata resistenza alla trazione, fornendole stabilità in situ
- La capacità di occlusione cellulare ritarda e/o previene la crescita epiteliale sottostante.

### Vantaggi:

- Facile da usare, non aderisce a se stessa quando è idratata
- Tempo di riassorbimento sufficiente per processi di riparazione ossea prolungati
- Facilmente ritagliabile durante l'intervento chirurgico per l'adattamento finale
- Può essere posizionata da entrambi i lati sia sui tessuti molli che sull'osso

### Indicazioni

- Aumento della cresta ossea
- Rigenerazione ossea intorno agli impianti
- Sinus Lift
- Difetti parodontali
- Resezione apicale della radice
- Siti post-estrattivi

### CONFORM MEMBRANA IN COLLAGENE RIASSORBIBILE

Codice	Descrizione	Dimensione
5091520	conFORM Resorbable Collagen Membrane	15x20mm
5092030	conFORM Resorbable Collagen Membrane	20x30mm
5093040	conFORM Resorbable Collagen Membrane	30x40mm

CONFORM è prodotto per ACE Surgical da Collagen Matrix, Inc.; Oakland, NJ, Stati Uniti.